



## VTM + SWAB SERIES



FILEDE


Multipurpose Viral Sampling System (Viral Transport Media)

**ENCODE Multipurpose Viral Sampling System (Non** Inactivated)

**KEMENKES RI AKL 10302120566** 

## Fitur & Manfaat:

- VTM/UTM ukuran tabung 10mL sebagai kemasan yang banyak dibutuhkan dalam sampling untuk virus COVID-19, Influenza, Flu Burung, HFM, Leprosy dan sebagainva
- Cairan isi VTM bewarna merah adalah bahan stabil berbahan BSA untuk virus dengan temperature tinggi, mengurangi dekomposisi virus dan meningkatkan populasi isolasi virus.
  - Diperlengkapi dengan 2 jenis swab
  - oropharing dan nasopharing
- Ujung swab berbahan non-toksik untuk virus memaksimalkan pengumpulan sampel Posisi break point swab berjarak
- dari kepala swab sehingga menghindari kontaminasi untuk operator
  - Tangkai berbahan plastic ABS sehingga tidak ada residu pelekat
- Area gagang swab berbahan kasar
- sehingga dapat cukup erat untuk dipegang pengguna Masa kadaluwarsa 24 bulan seiak produksi

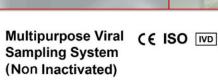

REE: VTM1102 Package Quantity: 50 Sets Kit Contain: Nasal swab 1x50pcs Throat Swab 1x50pcs Preservation solution 3.5ml \*50 pcs Package insert 1 pc






LOT

[1





ECREP CMC Medical Devices& Drugs S.L.
Add:C/ Horacio Lengo Nº 18,
CP 29006, Málaga, Spain

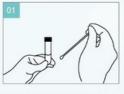

Collect a sample with a swab according to sampling demand.



Place swab into sterile sampling tube after sampling.



Break off swab stick above sterile sampling tube.



Screw on the lid of sterile sampling tube.



Label sterile sampling tube as

**Distributor & Importir Resmi:** 

## PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309C , Jakarta Selatan 12210, DKI Jakarta, Indonesia

P: (021) 5305073-74 | F: (021) 5304939 | E: info@isotekindo.co.id | M: 0811.171.0055 (Call & Whatsapp)

W: www.isotekindo.co.id